



LABTELLIGENC[®]
DIAGNOSTICS

Sheep & Goat Pregnancy Rapid Test Kit

Rapid Detection for Pregnancy in Ewe & Goat



SARSHAR GROUP

Head office: Unit 117, No.1812 Diplomat Building, Pole roomi St, Shariati St.,
Tehran, Iran. Tel: +98 21 22645450 | Cell: +98 910 9900039
www.Sarshargroup.com | www.Labtelligenc.com



SarsharGroup.com



Labtelligenc.com



کیت تشخیص سریع


آبستنی گوسفند و بز

به روش Latex microspheres

تشخیص زودهنگام آبستنی در گوسفند و بز بخش مهمی از فرآیند پرورش حیوانات مزرعه‌ای است و به دامپزشک کمک می‌کند تا به سرعت گوسفند و بز آبستن را از غیرآبستن تفکیک کند. تشخیص آبستنی دقیق، سریع و آسان، کلید بهبود راندمان اصلاح نژاد و تولید شیر و گوشت است. این محصول برای تشخیص زودهنگام آبستنی گوسفند و بز استفاده می‌شود. به طوری که از طریق تشخیص سرمی یا پلاسما می‌تواند تعیین کند که آیا با گذشت حداکثر ۲۸ روز در بز و ۳۵ روز در گوسفند از زمان جفت‌گیری یا تلقیح مصنوعی، دام آبستن است یا خیر. این محصول بر اساس روش ساندویچ آنتی بادی و با استفاده از ذرات لاتکس قرمز به عنوان نشانگر تولید شده است.

کاهش فاصله بین زایش (Lambing Interval)، بهبود نرخ زایش، افزایش تولید شیر، صرفه جویی در هزینه تهیه خوراک، بهبود بازدهی اقتصادی گله و کمک به تصمیم‌گیری برای حذف و کشتار دام ماده از مزایای به کارگیری از این کیت تشخیص آبستنی بشمار می‌رود. همچنین انطباق بالای نتایج تست، نسبت به تشخیص آبستنی به روش اولتراسوند، کاهش خطرات و استرس ناشی از معاینه برای مادر و جنین و هزینه کمتر، از ویژگی‌های این محصول می‌باشد.

کیت‌های تشخیص سریع دامپزشکی Latbelligenc دقت، سرعت و حساسیت بالا دارند. سادگی اجرا و سرعت بالا در ارزیابی نتایج از ویژگی‌های این محصول می‌باشد.

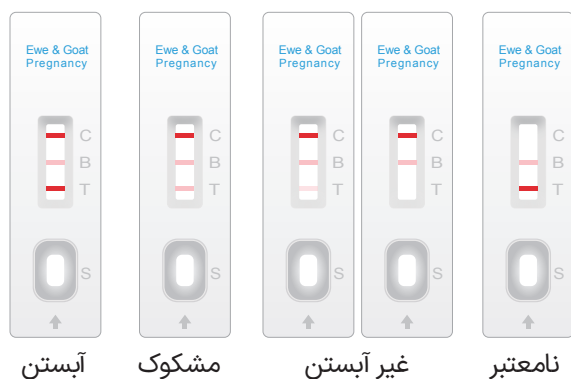


تفسیر نتیجه آزمایش

Ovine & Caprine Early pregnancy detection Rapid Test Kit	
نوع نمونه	سرم، پلاسما یا خون کامل
روش سنجش	Double sandwich lateral flow immunochromatographic assay
حجم نمونه	۳-۴ قطره (۹۰ µL)
مدت زمان نتیجه	۱۰ دقیقه
میزان حساسیت	۹۹%
دمای نگهداری	۲-۳۰ درجه سانتیگراد
مدت ماندگاری	۱۸ ماه
تعداد تست در هر کیت	۲۵ تست

مشخصات محصول

شماتیک انجام آزمایش

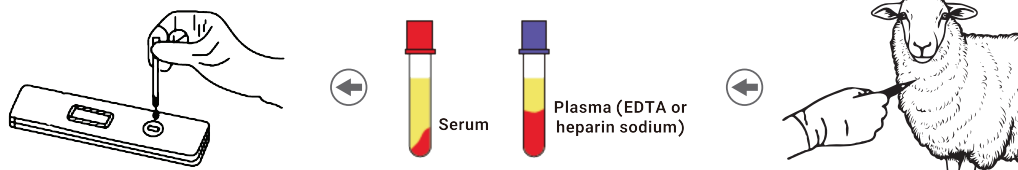

تولید شده در کارخانه سرشار زیست فارمد (گروه سرشار)

دریافت سریع
بروشور محصول

